


Spirometrie

pomocí custo spiro mobile | perfektní pojetí hygieny

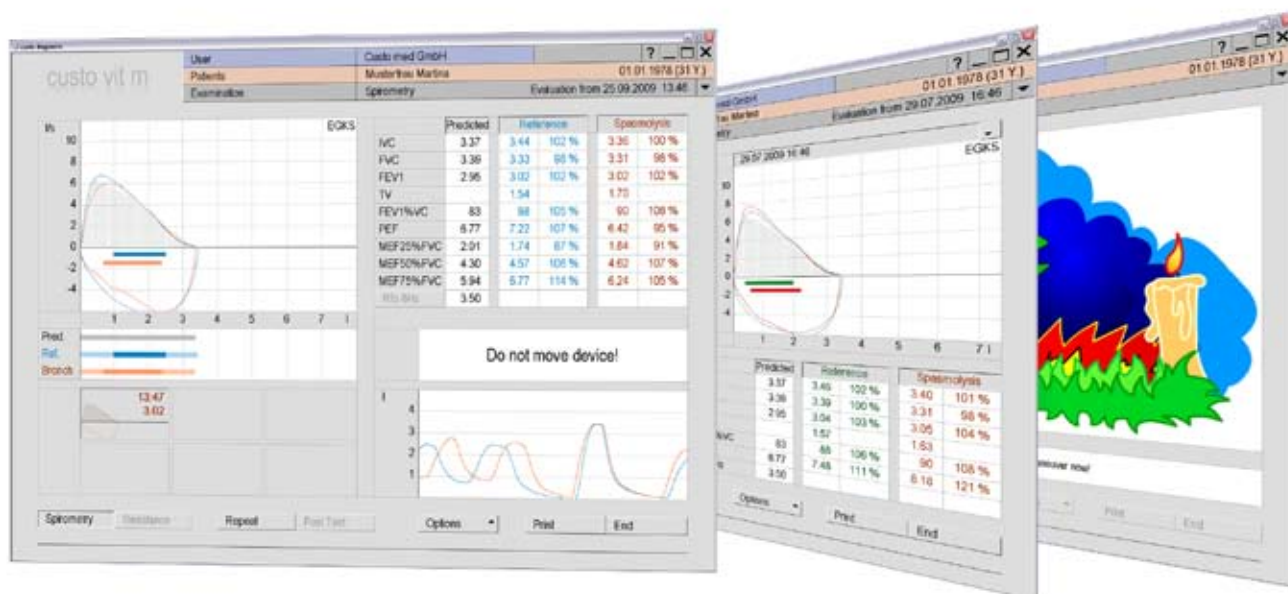

- mobilní použití na každém PC prostřednictvím USB připojení
- jednoduché a bezpečné provádění všech testů
- všechna měření pomocí jednoho fouknutí
- perfektní pojetí hygieny a desinfekce pomocí bakteriologických a virových filtrů custo spiro protect

- všechna vyšetření pacienta lze provádět či zobrazit v trendu
- komfortní reporty s předdefinovanými texty
- přehledné výtisky na formát A4 sestavené jedním kliknutím
- přímé spojení s lékařskou praxí: odesílání výsledků vyšetření a reportů e-mailem, faxem, PDF nebo datovým souborem (.cst)
- všestranná možnost integrace do existujících IT struktur (HL7, XML, SQL, GDT, SCP)



Váš autorizovaný custo med partner



MartSoft

Skladová 17, CZ-32600 PLZEŇ
Česká Republika
Tel./Fax: +420 377 464 545
e-mail: info@martsoft.cz , Internet: www.martsoft.cz

custo·med
EXCELLENCE IN DIAGNOSTICS

Leibnizstr. 7, 85521 Ottobrunn, Germany
Phone: +49 (0)89 71098-00, Fax: +49 (0)89 71098-10
Email: info@customed.de, Internet: www.customed.de

Specifikace

custo spiro mobile & spiro protect

Obsah dodávky

custo spiro mobile

měřicí hlavice
keramický filtr a náustek
bakteriologický a virový filtr
custo spiro protect
nosní klema



Metoda měření BTPS	diferenciální manometr s laminárním prvkem automatická BTPS korekce
Třída přesnosti	ATS standard, ISO 23747
Odpor vzduchu	2kPa na 12 l/s
Rozsah měření	± 12 l
Rozlišení	12 bit
Linearita	± 2 %
Napájení	přes USB
Délka připojovacího kabelu	cca. 5 m
Rozměry	velikost 140 * 150 * 45 mm (V * Š * H) hmotnost cca. 329 g
Provozní podmínky	teplota +10°C ... +40°C vlhkost 10 ... 90 %, bez srážení tlak vzduchu 900 ... 1200 hPa nadm. výška 0 ... 3000 m
Klasifikace	bezpečnostní třída II, třída IIa, typ BF, DIN EN 60601-1
Požadavky na SW	custo diagnostic 3.7 a vyšší
Perfektní pojetí hygieny	bakteriologický a virový filtr custo spiro protect (volitelné) jednorázové použití vyrobena podle DIN EN 1822-1 filtr třídy H13 (HEPA, 99.95%) testován podle DIN EN ISO 10933-1 nebo desinfekce podle specifikací výrobce

Spirometrie - funkce programu

- Měření podle národních a mezinárodních předpokladových hodnot
- Animace pro děti "Supící drak"
- Přehledné zobrazení naměřených hodnot a barevně rozlišených křivek
- Zřetelně uspořádaná kontrola terapie s automatickým dlouhodobým trendem

